

User Manual

ME-D807L

舒壓按摩棒使用說明書

SAMPO


隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取
並要求經銷商填妥購買日期，以確保您的權益

電壓	3號電池4顆	消耗功率	3W	機體淨重	110g
外型尺寸					
W155xD80xH54(mm)					

*本產品不附贈電池，電池需自行購買

各部名稱


- 1 遠紅外線發光罩
- 2 電池蓋板
- 3 震動電機
- 4 電源開關
- 5 按摩握把
- 6 電池座

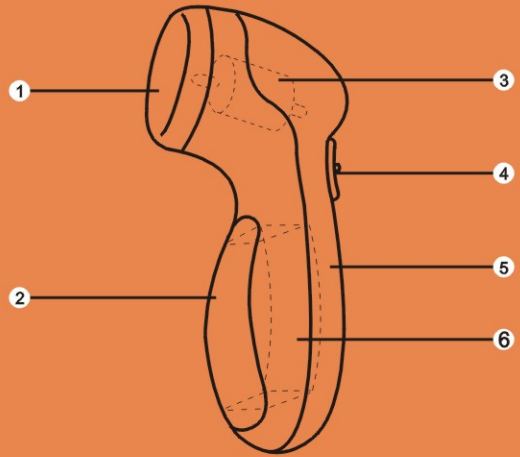


建議使用部位



臉部按摩

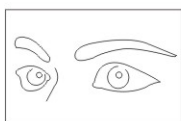

眼部紓壓

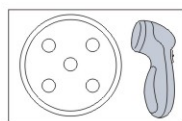

身體各處遠紅外線熱敷

使用說明

- 請將電池蓋板打開，把4顆3號電池依正負極方向放入產品電池座中，並將電池蓋板蓋上。
- 將電源開關往上推動開啓，並依使用需求切換功能。
- 將紓壓按摩器放置於欲按摩之部位上即可。


• 2種功能選擇：

本機開機後，使用者可依個人需求選擇按摩模式：提供熱敷與按摩的功能。

遠紅外線熱敷功能-將開關切至“熱敷”處(如右圖)，遠紅外線熱敷的功能即啓動，可促進血液循環順暢。

配合遠紅外線的按摩功能-將開關切至“按摩”處，遠紅外線熱敷和按摩功能同時啓動，可消除肌肉疲勞。

將開關切至“關”，即可關閉電源。

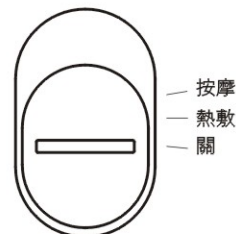

• 臉部按摩功能：

熱敷按摩臉部穴道，可消除疲勞。

• 眼部紓壓：

熱敷按摩眼部周圍穴道，可使眼部肌肉放鬆，消除眼睛疲勞。

• 身體各處遠紅外線熱敷功能：

遠紅外線加上40°C熱敷功能，可促進身體各部血液循環順暢，進而維護身體健康。

• 建議使用時間：

本產品建議使用時間為30分鐘，需連續使用時需要間隔10分鐘後再繼續使用。

常見故障及處理方法

故障現象	可能原因	處理方法
開機後不工作	沒有裝電池、電池極性錯誤或沒電	重新安裝電池
開機後不工作	沒有開啓電源	將電源開關往上推動開啓
開機後有異音	震動電機故障	送修處理
遠紅外線不亮	遠紅外線機體故障	送修處理

緊急處理方法

- 禁止非專業人員進行分解，修理，改造本產品，以避免本產品功能故障。
- 如有任何問題，請速洽售後服務專線，或就近經銷商洽詢。

關於售後服務

- 送修前，請先聯絡04-24180315諮詢專線，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理，絕對不要自行拆卸本產品進行修理。