

SAMPO

HL-H603

User Manual

聲寶SPA足部按摩機 使用說明書

保證書印製於說明書最後頁

請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益。

SAMPO

聲寶產品保證書

機號

聲寶SPA足部按摩機 HL-H603

姓名	男 女	出生日期	年 月 日	電話	電子信箱
住址					
購買日期	年 月 日	總經銷	店址	電話	

聲寶您的專屬

為維護您的權益，請即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網 <http://www.sampo.com.tw>

登錄或與公司聯絡(小獎禮產品免寄回)，始享有本公司自購買日起一年之免費服務，客戶

留存單據及請保存，並於本公司之工程師前往服務時主動出示本保證書以享受權益。

※服務範圍

- 天線、磁針、磁頭、擴音管、揚聲器、充電電池、熱感頭、印表頭、燈光感應、燈泡、軸承刀片及其
- 它配件等之消耗材不在服務範圍內。
- 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內。

送店收據


※請務必填妥購買日期並蓋店章以確保您的權益

聲寶股份有限公司·新寶集團 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號
免費諮詢專線：0800-005438 [0800-鈴鈴-我是聲寶] <http://www.sampo.com.tw> fax:(03)3286299 e-mail:cs@sampo.com.tw

※注意事項

- 本類產品使用於醫療用途時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
- 保證書內容請與日期未填寫或經修改或與現物不符者，則失去保證書保證效力
- 本產品請送交服務委託誠實公司
- 如有下列情形之一者，雖在保證期內亦不予免費維修
 - 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
 - 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
 - 擅自改裝商品或經外人維修所引起之故障或損毀
 - 按裝位置之撞擊或搬運所引起之故障或損毀
 - 故障係起因發生在機體以外者(如：錄影(音)帶，天線...等)

電 壓	110V / 60Hz	消耗功率	57W
機體淨重	2 KG	外型尺寸	L430 X W375 X H195 (mm)

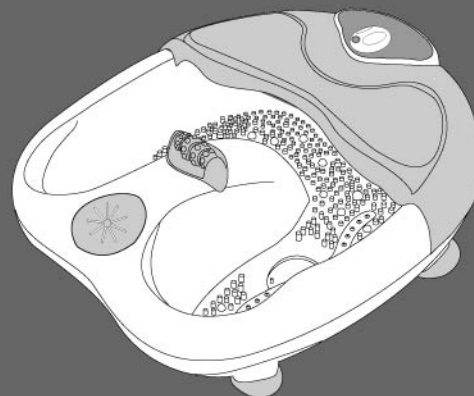


目錄

- 1 各部名稱
- 2 使用前安全注意事項
- 3 使用注意事項
- 4 使用方法
- 6 清潔與保養
- 7 家電小百科
- 8 緊急處理方法

各部名稱

- 1 上部機殼
- 2 下部機殼
- 3 功能選擇鈕
- 4 按摩配件架
- 5 塑膠腳底
- 6 防水蓋
- 7 氣泡出口
- 8 左右踏板配件 (有兩種配件可供更換)
- 9 配件:按摩滾輪
- 10 配件:多點按摩粒
- 11 配件:按摩球
- 12 紅外光熱力

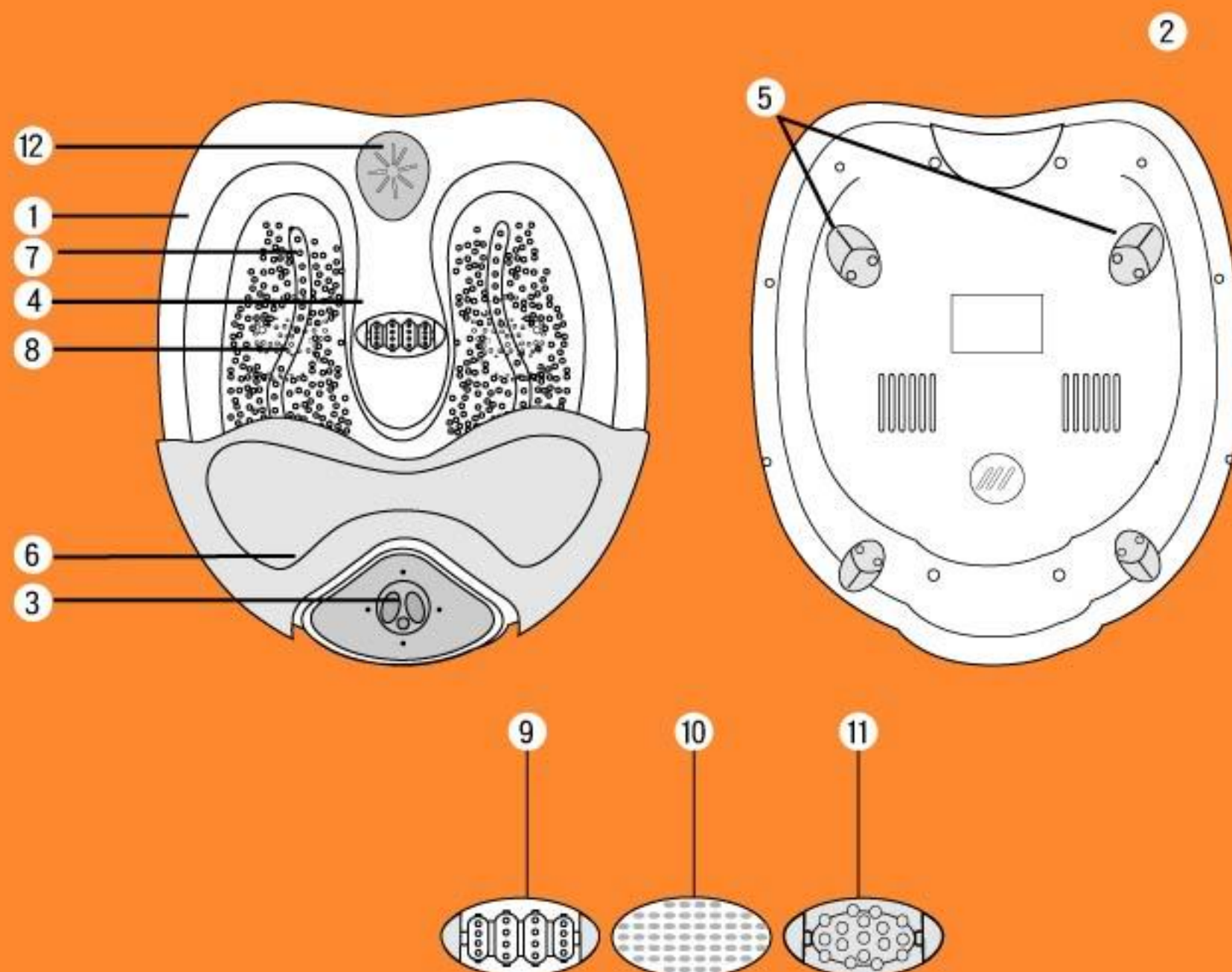

附件：說明書、保證書

使用前安全注意事項

- 先檢查按摩器本身，電源線與插頭是否完整而無破裂或異常情況，並確認電壓是否相符合 (台灣地區為110V)。
- 每次使用完畢後，應馬上把電源關閉，並且拔出插頭。清洗或置換任何零件或配件之前，也應先把電源插頭拔出。
- 除了按摩器本身配備的配件，其他一概不得採用。
- 萬一按摩器掉入水裡，千萬勿伸手碰觸。應馬上關掉電源，並將插頭拔出。
- 千萬不要把按摩器放在浴缸或洗滌槽近處，以免不小心碰撞掉入水中。
- 請勿將按摩器浸入水裏或其他液體內。
- 雙腳還在水中時，請勿嘗試插上或拔出插頭。
- 當按摩器仍在操作時，切勿置之不理。每當有小孩使用或靠近按摩器時，宜小心督導指示。
- 切勿企圖拉扯電線以拖動按摩器。電線應避免觸及熱的表層，且不要把電線當作握柄。
- 睡覺或打瞌睡時，皆不宜使用腳底按摩器。
- 這是一台家用的腳底按摩器，並不適合商業用途。



使用注意事項

- 使用之前請檢查電壓必須是110V/ 60Hz。
- 如果您的雙腳出現過敏或任何與雙腳有關的不適問題，請馬上停止使用，並且徵詢醫生的建議，決定是否繼續使用此按摩器。糖尿病患者、孕婦或患病者，應先得到醫生的同意方可使用。
- 如果您發覺肌肉或關節持續疼痛，應馬上停止使用此按摩器，並儘早去看醫生，很可能是較嚴重病症的徵兆，請勿掉以輕心。



使用方法

註：溫熱功能只能減緩水溫降低之速度，同時在環境室溫不同時，水溫降低之速度也會有所差異，並不能將冷水加溫成熱水，要進行溫熱按摩時需自行加入溫水。

- 把水注入按摩器之前，必須先關掉電源及拔出插頭
- 選擇你所要的按摩方式：
 - a. 乾式按摩 – 使用時水不必注入按摩器。
 - b. 濕式按摩 – 把溫水注入按摩器。
- 把腳底按摩器平放在您準備使用的地方，然後將水注入。最好注入溫水，感覺會較為舒服。可以個人喜好加入沐浴油，香精油或潤膚劑。
- 把腳底按摩器置放在椅子前面的地板上。
- 插上插頭，然後以順時針方向把開關上的箭頭調至你所選擇的位置。每次觸動開關或插頭時，務必先把雙手擦乾。
- 依您所選用的按摩法轉動調整鈕。（請參見對照表）
0 關 1 按摩/保溫/紅外光 2 按摩/保溫/SPA/紅外光 3 SPA/保溫

使用方法

- 先坐在椅子上，然後才把雙腳置入按摩器內，請勿站立於按摩器上，一定要坐下才可使用，以免造成損壞。
- 使用修足配件時，請置於按摩器正中央即可，雙腳向下壓，即可啓動配件。
- 附件
滾珠球 – 把腳跟放在滾球上按摩，刺激穴道，享受舒適鬆弛的按摩樂趣。
- 要享用更具滲透力的舒適按摩，可將腳板置於滾輪上，前後滑動。要感覺按摩的效力，可將腳板時而稍為向下壓，時而放鬆即可。
- 要倒掉按摩器裡的水，先把電源關上，並拔出插頭。把按摩器抬至洗滌槽或浴室，然後把它側向一旁，讓水從其中一個出口傾出。
- 每次使用腳底按摩器，最好不要超過20分鐘。若超時使用，按摩器可能會產生過熱。在這種情形之下，應馬上停止使用，並且等按摩器完全冷卻才可再使用。不宜在餐前或餐後使用按摩器。




清潔與保養

清洗

- 先拔出插頭，等到按摩器冷卻後才加以清洗。
- 把按摩器裡的水倒掉，可用水沖洗按摩器，但絕不可將整台按摩器浸入水中。接著，用一塊軟布或濕布擦淨。留意開關控制器，不要讓它觸及水份或其它液體。
- 清洗後，用乾布擦乾按摩器表層。
- 可把滾軸拆下清洗，以拇指和食指夾住滾軸，然後把它拉出，放在水龍頭下沖洗。
- 切勿使用磨蝕劑、洗滌劑或清潔劑清洗腳底按摩器。
- 務必經常把按摩器的電線弄直，以免捲成一團，易造成電線損害。
- 請將水倒乾後再插電將開關切至設定(2)，再將機體倒放並輕拍打幾下，運轉約20秒讓幫浦內的水排出，能延長機器使用壽命。

存放

- 使用後應收藏在原有的盒子裡，或存放於乾淨及乾爽的地方。
- 為免毀壞，切記不要把電線纏繞在按摩器上。
- 不可將按摩器的電線懸掛起來以支撐整台按摩器。

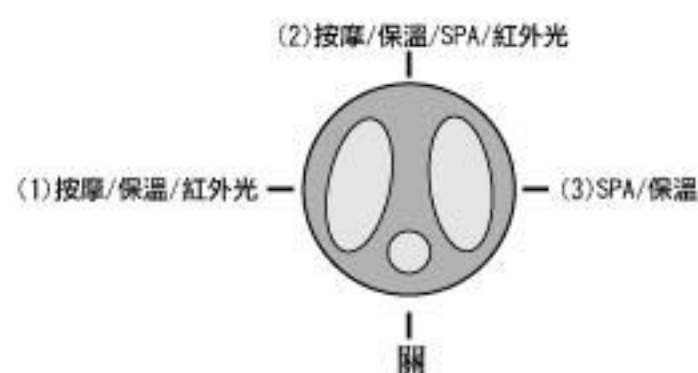



生活小常識

腳底有許多重要穴道，如適當以溫水泡腳，可促進新陳代謝，加強體內循環，此時可輔以不同種類之精油：

精油種類	功效
茶樹	抗菌除臭
桉樹	軟化肌膚
薄荷	促進血液循環
薰衣草	舒緩、安眠潤膚
迷迭香	提神、潤膚
玫瑰	促進血液循環
檸檬	排水
百里香	排水排毒

注意：泡腳機若加入精油搭配使用，使用完畢後務必清洗乾淨，否則長期下來，恐因殘存的精油影響機體正常運作。
清洗方式：傾倒已加入精油之泡腳水後，再加入清水，將機體運轉設定轉至「保溫+SPA+紅外光」，為時約10-15分鐘，機體會自動清洗。反覆進行此動作數次(視機體髒污程度)，再以潔布拭淨、倒置機體即可。

...更多食譜、選購指南、生活常識之家電小百科 歡迎登入》



緊急處理方法

當本機有動作異常現象發生時，請立即關閉電源，拔掉插頭，儘速通知聲寶0800免費諮詢專線協助處理，切勿自行拆修，以免發生危險。

進口商：

- 名稱：韓達工業有限公司
- 地址：台北縣新店市寶橋路235巷118號2F
- 電話：(02) 8912-1000

