


特別注意要點

安全注意事項

- 本產品不附贈電池，請自行購買電池使用(AAA 四號電池X3顆)。
- 請避開會濺水的場所以防止故障。
- 本產品請放置在平坦處。
- 勿靠近火源、瓦斯爐...等易燃處。

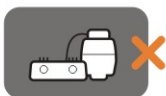

進口商：獅子心股份有限公司 地址：台南縣717仁德鄉仁義六街97號 消費者服務專線：0800-008-598

http://www.sampo.com.tw fax:(03)3286299 e-mail:cs@sampo.com.tw

免費諮詢專線：0800-005438 [0800-5555-我是聲寶]

聲寶股份有限公司 ● 新實集團 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號

※ 站站修理 請務必填妥購買日期並蓋店章以確保擁有權益

- 除另有約定外，服務區域限中華民國管轄範圍內。
- 輸送刀片及其它配件等之消耗材不在保固範圍內。

※ 天線、喇叭、磁頭、揚音器、錄音、充電電池、感應器、印表頭、螢光燈管、燈泡、

• 由於天災地變或人為引起之故障或損毀

• 因使用之過失或使用錯誤，以致造成故障或損毀

• 安立櫃之撞擊或搬運所引起之故障或損毀

• 故障之起因發生在機體以外者(如：錄影(音)帶、天線...等)

• 如有下列情形之一者，即在保固期間內不予免費維修

• 本產品最後服務委託獅子心公司

• 保固期內購買日期未填寫或經更改與現物不符者，則失去保固與維修效力

• 本家電產品使用於非利國境內時，其保固期按保固書所載期限減半保固

※ 注意事項

謝謝您的惠顧

姓名	男/女	出生日期	年	月	日	經銷商	地址	電話
住址	電子信箱							
購買日期	年							

ME-L703L 聲寶幻彩按摩器 機號 聲寶產品保證書 SAMPO

保證書印製於說明書最後頁
並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

SAMPO

聲寶幻彩按摩器 使用說明書


ME-L703L

User Manual

淨重 | 0.18kg | 使用電池 | AAA 四號電池X3


外型尺寸 | W101XD96XH93(mm)

◎本產品不附贈電池，電池需自行購買

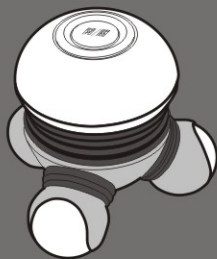

各部名稱

- 1 開關
- 2 電池盒蓋
- 3 按摩凸點 (三個)
- 4 電池盒

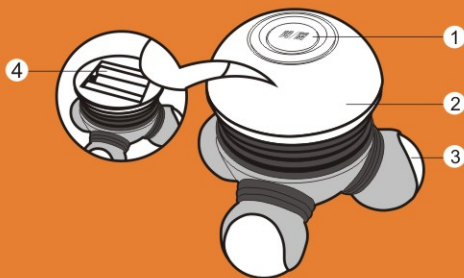

使用方法

使用方法

裝入方式：

1. 旋開電池盒蓋，上蓋即開啓（左：鎖緊，右：開蓋，如圖1）。

2. 裝入3顆 AAA 4號電池於電池盒中，壓住綵帶（如圖2）

3. 將蓋子蓋上，握住本體上方，按下開關，以三個按摩凸點（球型）按摩以下部位（如圖3）。

例：◎可以按摩頸部、肩膀。

◎可以按摩大腿、小腿（如圖4）。

◎可以按摩手臂肌肉。

◎能按摩腳底或其他部位的穴道。

※欲取出電池，將底部綵帶抽出，便可一併取出三顆電池（如圖5）

4. 不使用時，可先將電池拿出，等使用時再裝入以延長電池壽命。

