

# User Manual

ME-P801C

按摩棒 使用說明書

# SAMPO

保證書印製於說明書最後頁  
請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

按摩棒 ME-P801C 機號

貴賓產品保證書

SAMPO

姓名

男女

出生日期

年 月 日

電話

電子信箱

住址

購買日期

年 月 日

經銷商

店址

電話

謝謝您的惠顧

為維護您的權益，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網<http://www.sampo.com.tw>

登錄或與公司聯絡(家電產品免寄回)，始享有本公司自購買日起一年之免費服務，客戶

留存聯請妥善保存，並於本公司之工程師前往服務時主動出示保證書以享受權益。

※服務保證範圍

天線、喇叭、磁頭、攝像管、鏡頭、充電電池、熱感頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、軸

承刀片及其他配件等之消耗材不在保證範圍內

。除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內

↘送站修理

※請務必填妥購買日期並蓋店章以確保應有權益

※注意事項

●本廠電產品使用於營利商業用途時，其保證期限按保證書所載期限與半年保固

●保證書內登載日期未填寫或經塗改或與現場不符者，則失去保證書效力

●本廠品質服務委託誠實公司

※如有下列情形之一者，雖在保證期間內不予免費維修

●由於天災地變或人為引起之故障或損毀

●因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀


●擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀

●安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀

●故障之起因發生在機體以外者(如：錄影〈音〉帶、天線...等)

臺灣股份有限公司·臺灣集團 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號  
免費諮詢專線：0800-006438 [0800-鈴鈴-我是貴賓] <http://www.sampo.com.tw> fax:(03)3286299 e-mail:cs@sampo.com.tw

電壓	110V /60Hz	消耗功率	25W
機體淨重	1.2 kg	外型尺寸	W370×D83 ×H 105 (mm)

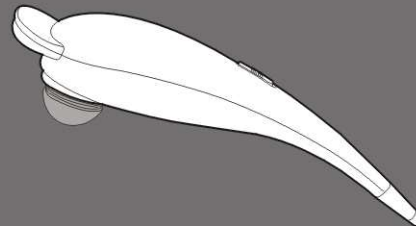


## 目錄

- 1 各部名稱
- 2 安全注意事項
- 4 產品特點
- 5 使用方法
- 6 清潔與保養
- 7 緊急處理方法
- 8 關於售後服務
- 9 家電小百科

## 各部名稱

- 1 本體
- 2 開關
- 3 按摩頭
- 4 凸狀按摩頭
- 5 針狀按摩頭
- 6 槌狀按摩頭

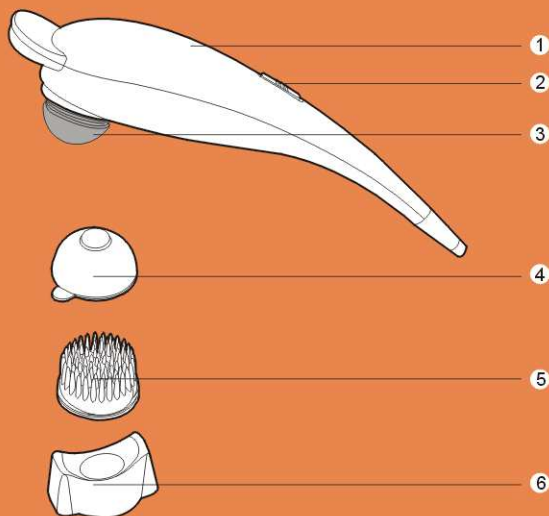

## 安全注意事項

- 請用電壓110V 7A(含)以上之插座。
- 請勿與其他電器製品同時共用一個插座。
- 請勿用潮濕的手插接電源，以免發生危險。
- 本機體、電源和插頭，不可局部或完全浸於水中清洗，以免發生觸電。
- 如果機體掉落地面或受到強烈撞擊時會發生故障。
- 當電源線有破損時，請勿使用。
- 本機不使用時，請將插頭拔起。
- 本產品僅供一般家庭使用，請勿做商業及其他用途。





- 建議從低速按摩開始，然後再增加速度。
- 建議本產品使用於身體同一部位時，請勿超過10分鐘。
- 不使用本產品時，請務必將插頭從插座上拔出。
- 懷孕期間切勿使用本產品，同時也要避開傷口處，避免造成意外。
- 用餐後，一小時內請勿使用本產品。
- 孩童或殘障人士使用時，應有成人在旁邊監督。
- 本產品禁止在頸部以上及骨頭關節部位使用，以避免使用之傷害。
- 長髮使用者請將頭髮束起再使用，避免頭髮捲入發生危險。
- 請勿在過敏皮膚處過度按摩或身體不適時使用本機器，若您有疑慮，使用前請先諮詢過醫生的意見。
- 使用前請先檢查機器是否有破損或故障後再使用，如有破損或異常狀況請勿使用。

## 產品特點

- 四種外型可替換按摩頭設計，按摩舒暢無比
- 可調整強，弱兩速,適合消費者不同需求
- 消除疲勞，促進血液循環,新陳代謝
- 獨特按壓把手設計，效果更佳
- 具震槌功能

## 使用方法

- 1.將插頭插入電源插座上。
- 2.啓動開關(即速度調節開關)以啓動按摩器。
- 3.把機器使用在想要按摩的身體部位，使用時保持舒適，若肌膚有不適，請停止使用。
- 4.強、弱兩段供選擇。
- 5.使用完按摩器，請將開關推到關的位置，再將插頭電源拔掉。
- 6.附有多款按摩頭，可以個人需求更換，使用時請直接套上即可。
- 7.可使用部位手臂、小腿、大腿、腹部
- 8.可搭配按摩霜使用，按摩更舒適。

## 清潔與保養

- 使用完後與清潔前，請先拔除電源插頭。
- 請勿在機體上使用苯、稀釋劑或其他具腐蝕性溶劑。
- 請使用濕布擦拭清潔本產品。
- 避免有棉絨、綿絮及頭髮等異物捲入本體，以免影響產品使用上的危險。
- 請勿將本產品儲藏在高溫或火源附近。
- 請勿將本產品長時間放在太陽直射的地方。
- 不要拉扯或用電線將本產品拉起。
- 切勿讓水或液體滲入本產品內。

## 緊急處理方法

- 使用時若有持續發生冒煙或起火燃燒現象，請立即關閉開關且將插頭儘速拔起，並通知經銷商或與聲寶0800免費諮詢專線聯繫。
- 本產品的電源線如有任何損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換，以避免危險。

## 售後服務

### 關於售後服務

- 若發生故障，請立即停止使用，並將電源插頭拔下。
- 若在故障狀態繼續使用，或自行修理，均可能發生危險。
- 送修前，請先聯絡聲寶0800免費諮詢專線，將產品型號及故障情細詳細說明，客服中心會協助處理。
- 絕對不要自行拆開外殼自行修理。



### 進口商

公司：承琮國際有限公司  
地址：台中縣大里市仁愛路201號  
電話：04-24925427

## 生活小常識

### 如何減輕肩膀酸痛

- 肩膀酸痛時，除了身體會不舒服，更會影響工作或讀書效率。
- 消除肩膀酸痛的有效穴道，乃是位於大拇指和食指之間的「合谷穴」，及位於手背上食指和中指中間的「頸頂點」。如果用手指或筆頭刺激合谷穴和頸頂點（如下圖所示），肩膀酸痛能立刻減緩許多。



頸頂點



合谷穴

...更多食譜、選購指南、生活常識之家電小百科 歡迎登錄>>



The Sampo logo is displayed in a bold, white, sans-serif font. The letter 'O' is stylized with a white dot above it, resembling a traditional Japanese 'O' character. The background of the entire page is a repeating pattern of the word 'SAMPO' in a light orange color.

## 注意事項

- 本家電產品使用於營利商業用時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
- 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力
- 本產品售後服務委託誠實公司

如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待

- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
- 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
- 故障之起因發生在機體以外者〔如：錄影(音)帶，天線...等〕