

# User Manual

銀鑽按摩棒使用說明書

ME-D816L


SAMPO

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取  
並要求經銷商填寫購買日期，以確保您的權益

電壓	消耗功率	機體淨重
AC110V-60Hz	15W	520g
外型尺寸		
W75xD350xH115(mm)		

## 各部名稱

- 1 遠紅外線燈罩
- 2 震動式按摩頭
- 3 電源開關
- 4 人體工學握把
- 5 電源線

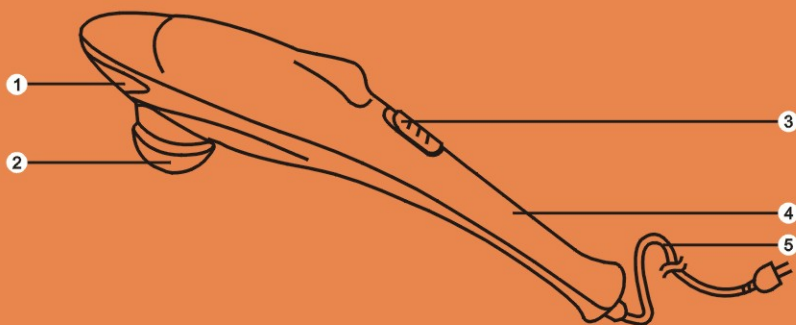

建議使用部位



背部按摩



肩部按摩



手臂按摩



大腿按摩



小腿按摩



腳底按摩

使用說明

- 請將電源插頭插入家用插座中(110V)。  
開啓按摩棒上的電源，並請將按摩棒放至於欲按摩之部位上。

- 兩段式按摩震盪強度選擇：  
開啓電源開關後，可依照個人需求往上或往下調整按摩強度(如右圖)。  
將開關往上推為強度震動按摩，幫助消除酸痛；將開關往下推則為弱度震動按摩，幫助促進代謝、消除疲勞。
- 遠紅外線溫熱功能：  
啓動1~2分鐘後，產生溫熱之遠紅外線效果，可配合推拿按摩促進血液循環，達到舒緩酸痛的功效。
- 符合人體工學設計：  
流線形握把附指溝設計，可輕鬆握持並施力於身體欲按摩之部位。
- 建議使用時間：  
本產品建議使用時間為30分鐘，須連續使用時需要間隔15分鐘後再繼續使用。
- 使用完畢後，請關閉電源開關，且拔除電源線(切勿拉扯電源線)。



強  
關  
弱

常見故障及處理方法

故障現象	可能原因	處理方法
開機後不工作	電源插頭未插牢	重新插牢電源插頭
開機後不工作	沒有開啓電源	開啓電源
開機後有異音	內部零件故障	送修處理
突然停止工作	內部過熱保護	關閉電源並讓本產品休息半小時後再使用

緊急處理方法

- 禁止非專業人員進行分解，修理，改造本產品，以避免本產品功能故障。
- 如有任何問題，請速洽售後服務專線，或就近經銷商洽詢。

關於售後服務

- 送修前，請先聯絡04-24180315諮詢專線，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理，絕對不要自行拆卸本產品進行修理。

售後服務商：禾亞實業有限公司  
地址：台中縣大里市瓦瑤路56巷6號  
售後服務專線：04-24180315