


聲寶股份有限公司 · 聲寶集團 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號

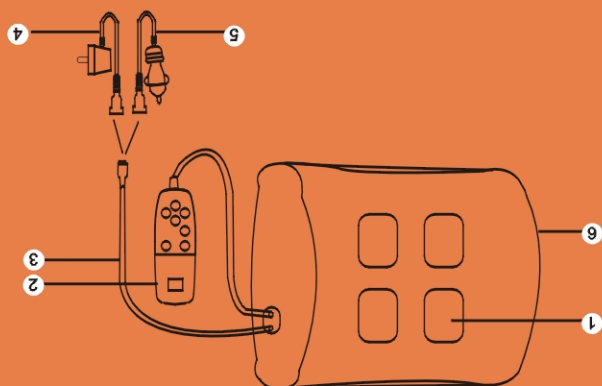

- 6 布質發泡體
 - 5 車用電源
 - 4 家用電源
 - 3 電源線
 - 2 控制器
 - 1 震動馬達
- 各部名稱

外型尺寸	W390xD360xH120 (mm)
電壓	AC110V-60Hz-DC12V
消耗功率	12W
機體淨重	800g

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取
並要求經銷商填妥購買日期，以確保您的權益

SAMPO

紓壓按摩墊使用說明書

ME-D811GL

User Manual

建議使用部位



使用說明

• 請將按摩墊放置於欲按摩之部位上，並將電源接頭連接至按摩墊上，再將電源插頭插入車用或家用插座(110V)中即可。

• 啟動開關（含設定工作時間）

按開關鍵後進入時間選擇模式(此時液晶顯示00)。

再按一次，設定工作時間為15分鐘後停止(此時液晶顯示15,閃爍數秒，之後開始倒數)。

再按一次，設定工作時間為30分鐘後停止(此時液晶顯示30，之後開始倒數)。

再按一次時回到時間選擇模式(此時液晶顯示00)。

• 9種模式選擇：

按模式鍵後進入按摩模式為"A0-漸進敲擊模式"，依個人需求按壓可設定模式，模式如下：

液晶顯示A1，即表示按摩方式為左右交替模式。

液晶顯示A2，即表示按摩方式為快速循環模式。

液晶顯示A3，即表示按摩方式為漸進循環模式。

液晶顯示A4，即表示按摩方式為對角交替模式。

液晶顯示A5，即表示按摩方式為正轉循環模式。

液晶顯示A6，即表示按摩方式為全方位振動模式。

液晶顯示A7，即表示按摩方式為間歇敲擊模式。

液晶顯示A8，即表示按摩方式為局部振動模式。

液晶顯示A9，即表示按摩方式為反轉循環模式。

• 3種按摩強度選擇：

本機開機按摩強度設定為中速，顯示值為92，可依次按壓強度設定鍵，來調整按摩強度。

按摩強度可分為弱速，中速，強速。其中弱速顯示值為91，強速顯示值為93。

• 4種按摩位置選擇：

本機開機按摩位置設定為4個振動馬達同時啟動，可依您欲需按摩之部位，依次按壓位置

進行選擇及調整，位置1即表示，振動馬達啟動位置再按一次即可停止此位置之運作，依此類推。

• 建議使用時間：

本產品建議使用時間為30分鐘，需連續使用時需要間隔10分鐘後再繼續使用。



常見故障及處理方法

故障現象	可能原因	處理方法
開機後不工作	電源插頭未插牢	重新插牢電源插頭
開機後不工作	沒有開啓電源	開啓電源
突然聲音變大	使用時間過長	關閉電源並讓本產品休息半小時後再使用
突然停止工作	使用時間過長	關閉電源並讓本產品休息半小時後再使用

緊急處理方法

- 禁止非專業人員進行分解，修理，改造本產品，以避免本產品功能故障。
- 如有任何問題，請速洽售後服務專線，或就近經銷商洽詢。

關於售後服務

- 送修前，請先聯絡04-24180315諮詢專線，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理，絕對不要自行拆卸本產品進行修理。

售後服務商：禾亞實業有限公司
地址：台中縣大里市瓦瑤路56巷6號
售後服務專線：04-24180315