

User Manual

ME-H502H

熱敷震動按摩機 使用說明書

SAMPO

熱敷震動按摩機 ME-H502H 機號

聲寶產品保證書

SAMPO

請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益。
保證書印製於說明書最後頁

發行所：台灣

姓名	出生日期	電話	電子信箱	住址
男 / 女	年 月 日	電話	電子信箱	住址
購買日期	經銷商	店址	電話	

*注意事項

● 本家電產品使用於營利商業用途時，其保證期限按保證書所載期限減半保回

● 保證書內容購買日期未填寫或將塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力

● 本產品售後服務委託誠實公司

* 如有下列情形之一者，雖在保證期內亦不予免費維修

- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
- 擅自改裝商品或經外人維修所引起之故障或損毀
- 擅自改裝商品或經外人維修所引起之故障或損毀
- 按裝位置之選擇或搬運所引起之故障或損毀
- 故障係起因發生在機體以外者 (如：錄影(音)帶，天線...等)

送站修理

* 請務必填妥購買日期並蓋店章以確保您的權益

* 服務保證範圍


● 天線、應針、磁頭、攝像管、鏡頭、充電電池、熱感頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、軸承刀片及其

它配件等之消耗材不在保證範圍內。

● 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內。

聲寶股份有限公司·新寶集團 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號
免付費諮詢專線：0800-005438 [0800-鈴詩-我是聲寶] <http://www.sampo.com.tw> fax: (03)3286299 e-mail: cs@sampo.com.tw

電 壓	ac110V / 60Hz	消耗功率	9.5W
機體淨重	1.08Kg	外型尺寸	L371×W116×H160(mm)

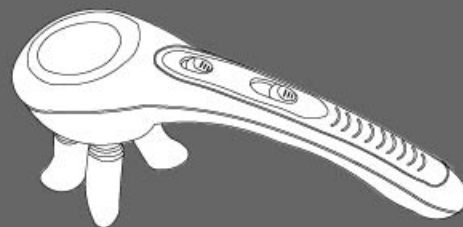


目錄

- 1 各部名稱
- 2 使用前安全注意事項
- 3 使用方法
- 5 重要注意事項
- 7 清洗與保養
- 8 本機特點
- 10 緊急處理方法

各部名稱

- 1 舒緩熱敷裝置
- 2 四爪按摩器
- 3 彈性緩衝設計
- 4 二段速切換開關
- 5 電源/使用模式切換開關
- 6 長把手

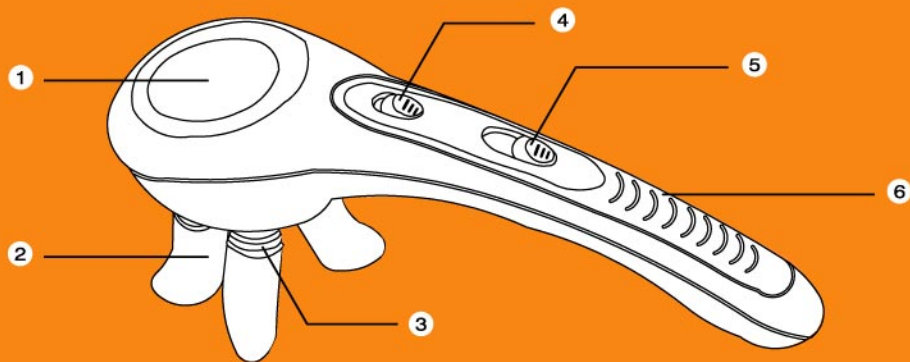

使用前安全注意事項

- 若患有相關疾病請先請示醫生是否適合操作本按摩機。
- 操作本機時切勿離開特別是有小孩在場時。
- 操作過程中請勿覆蓋任何物品在機體上。
- 操作本機時請勿超過二十分鐘以上。
- 操作時機體表面會產生熱源請勿長時間使用，請待冷卻後再次使用本機。
- 請勿將本機使用在容易受刺激或腫起來的皮膚表面上。
- 本機僅供按摩使用非醫療用品請勿使用在治療上。
- 睡前請勿使用本機，按摩有刺激的效果會影響您的睡眠。
- 請勿在床上操作本機。
- 請勿將本機使用在被治療過病痛的傷口位置上。
- 大人不在小孩身旁時不可操作本機。
- 本機在運作時發光表面會產生溫熱感，在震動按摩的熱敷狀態下請小心使用。




使用方法

操作使用程序：

- 在插入電源線前請先確認按摩棒模式調整到“關”的位置上
- 將電源線插入ac110V插座
- 調整按摩棒的操作模式到“按摩”或“按摩 + 熱敷功能”
- 調整按摩棒的速度模式選擇“高速按摩或低速按摩”

操作模式：

關
按摩
按摩 + 熱敷功能

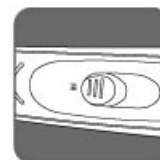

使用方法

- 依照說明書正確使用按摩機，將可以舒展您的肌肉，解除疲勞，別擔心會造成您肌肉的傷害。
- 按摩同一穴道最少需要三分鐘以達到解除疲勞的功效。
- 按摩同一穴道最多請勿超過五分鐘並依照您的需求調整按摩位置與時間。



重要注意事項

當使用本產品時，應該遵守基本的預防措施，請根據以下內容操作：

在使用前請先閱讀本說明書以減少使用電動按摩棒所產生的危險。

- 在使用後請立即從插座上拔掉電源線。
- 請勿讓本機體掉入水中或放置在容易碰到水的地方。
- 禁止在浴室及洗澡期間使用本產品。
- 本產品為家庭專用，不得使用於商業用途。

警告：為減少避免使用產品而造成傷害如火災、電線走火等情形請注意以下幾點：

- 在使用本產品時請勿使用任何附加配件。
- 本產品不適用於小孩、殘障者或有身體病痛者。



重要注意事項

- 本機表面請遠離火源。
- 請勿持續在電毯或棉被等軟物下使用本產品，避免使用過熱後產生火災。
- 在沈眠狀態時請勿使用本產品。
- 請勿滴精油或任何異物在本產品上。
- 請勿拆開本機體將噴氣物、臭氧、液化體放置在內使用。
- 使用本產品時請勿接近眼睛或刺激身體敏感的部位。
- 請勿私自拆卸本機體以免造成機械損壞。
- 請勿在軟質的布料上使用本機。
- 請勿在室外使用本產品。
- 不使用本產品時請將開關開至“關”處再將電源線拔起。



清洗與保養方法

清潔

- 待機體冷卻並確認拔除電源線後請以乾布擦拭機身。
- 請勿讓水滴或液體滲入機體的把手內。

收藏

- 從插座上拔掉電源時，請用手握住插頭部份，不可直接拉扯電源線並將機體存放在乾燥的地方，請不要將電源線纏繞在一起以避免電源線損壞。



本機特點

本產品經由專業人士所共同設計：

這個創新設計是來自人體手指按摩的概念，改善手指按摩的不足並藉著四爪彈性震動的緩衝效果，來減少一般機械按摩過量的按摩力道，以放鬆您的肌肉。

如何達成專業按摩的成效：

按摩棒的四爪像是人體手指按摩般，可調整按摩力道（輕速按摩、高速按摩來減少肌肉的疲勞）。藉著按摩棒上四爪內小馬達彈性震動的緩衝效果力道來按摩舒展肌肉上的壓力，您只會感覺到舒暢而不會疼痛。您的肌肉疼痛和疲勞將立即被舒展放鬆。

藉由按摩棒適當移動按摩身體的不同部位，來感受指壓按摩搓揉肌肉的感覺，調整四爪按摩棒的位置能正確的按摩您的身體穴位。

- 強力震動按摩，有效放鬆肌肉、消除疲勞。
- 熱敷舒緩裝置，促進血液循環、通筋活絡。
- 四指加強型按摩爪及二段速控制設計。
- 亦可適用於腰、臀等部位局部推指按摩，以促進脂肪分解，加速新陳代謝。



緊急處理方法

緊急處理方法

使用中如發生火花或起火燃燒現象，請速拔掉電源插頭，並通知聲寶0800免費諮詢專線協助處理，切勿自行拆卸本機，以免發生危險。

「若電源線損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換以避免危險。」

售後服務

關於售後服務

若發生故障，請立即停止使用，並將電源插頭拔下。

若在故障狀態繼續使用，或自行修理，均可能發生危險。

送修前，請先連絡聲寶0800免費諮詢專線，將產品型號及故障情形詳細說明，客服中心會協助處理。

絕對不要自行拆開外殼進行修理。

進口商：

- 名稱：韓達工業有限公司
- 地址：台北縣新店市寶橋路235巷118號2樓
- 電話：(02) 8912-1000