

# User Manual

ME-D808GL

舒壓按摩墊使用說明書

SAMPO

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取  
並要求經銷商填寫購買日期，以確保您的權益


電壓 | 1 號電池兩顆 | 消耗功率 | 2W | 機體淨重 | 200g

外型尺寸 | W340xD95xH250(mm)

\*本產品不附贈電池，電池需自行購買

各部名稱

- 1 布套
- 2 襯墊泡棉
- 3 按摩震動馬達
- 4 電源開關
- 5 電池座

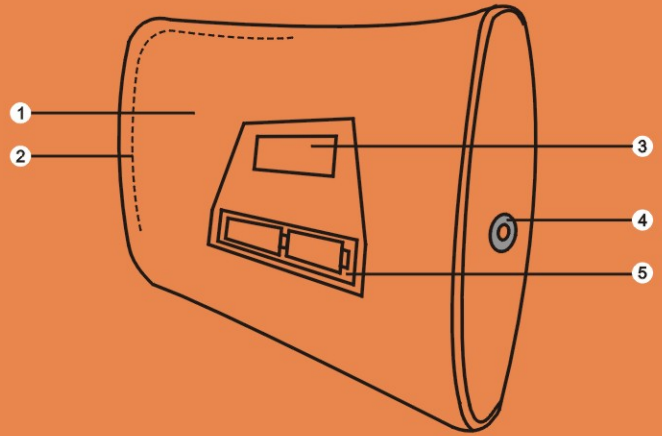

### 建議使用部位



### 使用說明

- 請拉開產品背面拉鍊，依正（+）負（-）極性方向指示，裝入2顆1號電池於電池座上。  
請將紓壓按摩墊放至於欲按摩之部位上，啟動電源即可。

#### • 便利的無電源線設計：

電源開關位於產品側面，按一下即啟動按摩功能，再按一下即關閉電源。（如右圖）

本產品僅需安裝電池後即可使用，可依照個人需求調整按摩位置，輕鬆針對身體各酸痛處（如按摩頸／背／腰／大腿／小腿及腳底等部位）按壓，促進血液循環。



#### • 任何場所均可使用：

由於本產品使用便利的無電源線設計，因此在居家、開車、辦公室及任何場所均可使用，隨時為您解除背腰部肌肉鬆痛與疲勞感，調整新陳代謝。可當午安枕使用，不會壓迫手臂，造成酸痛及產生麻痺。

可置於汽車座椅上，按摩頸部、腰部及背部，舒緩長時間開車的疲勞。

#### • 建議使用時間：

本產品建議使用時間為30分鐘，須連續使用時需要間隔15分鐘後再繼續使用。

#### • 使用完畢後，請關閉電源開關。

### 常見故障及處理方法

故障現象	可能原因	處理方法
開機後不工作	沒有裝電池，或安裝之電池極性錯誤或沒電	重新安裝或更換新電池
有異音	馬達故障	送修處理
布套破損	被銳利或其他異物損傷	送修處理

### 緊急處理方法

- 禁止非專業人員進行分解，修理，改造本產品，以避免本產品功能故障。
- 如有任何問題，請速洽售後服務專線，或就近經銷商洽詢。

### 關於售後服務

- 送修前，請先聯絡04-24180315諮詢專線，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理，絕對不要自行拆卸本產品進行修理。