



新寶集團 ● 新寶集團 桃園縣龜山鄉大崗村頂湖路26號  
 免費諮詢專線：0800-00-5438 [0800-鈴鈴-我是新寶] <http://www.sampo.com.tw>

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取  
 並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

**SAMPO**

腳底按摩器 使用說明書


HL-H305H

# User Manual





電 壓	110V / 60Hz	消耗功率	500W
機體淨重	3.05Kg	外型尺寸	L453 × W404 × H235(mm)

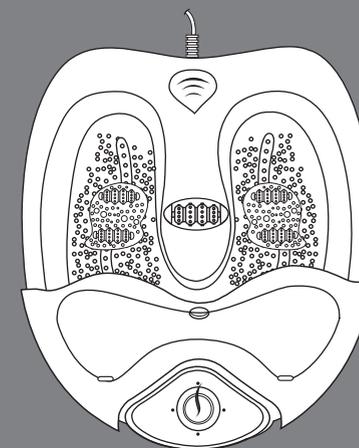


## 目錄

- 1 各部名稱
- 2 使用前安全注意事項
- 3 各部件安裝
- 4 使用方法
- 5 安全注意事項
- 6 清潔與保養
- 7 緊急處理方法

Sampo Good Health

## 各部名稱


- 1 上部機殼
- 2 下部機殼
- 3 功能選擇鈕
- 4 按摩配件架 (有三種配件可供更換)
- 5 塑膠腳底
- 6 電源線
- 7 氣泡出口
- 8 左右踏板配件 (有兩種配件可供更換)
- 9 配件:按摩滾輪
- 10 配件:多點按摩粒
- 11 配件:按摩球
- 12 紅外線熱力
- 13 防水蓋
- 14 配件:左右穴位按摩踏板
- 15 配件:左右滾輪按摩踏板

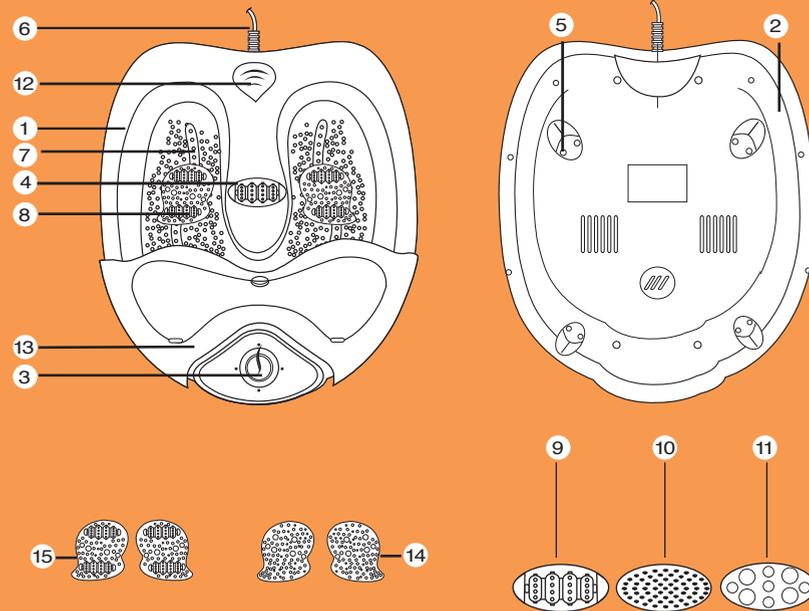

附件：說明書、保證書

## 使用前安全注意事項


- 使用前請先檢查按摩器本身，電源線及插頭是否完整而無破損或無異常情況，並確認電壓是否相符合(台灣地區為110V)。
- 每次使用完畢或清洗本產品時，應把電源關閉，並拔除插頭。
- 請勿用潮濕的手拔除或插入插頭。拔除插頭時請抓住插頭二側拔除插頭，請勿拉扯電源線。
- 本產品僅供家庭使用；若使用者為兒童或老人時，需有大人在旁陪伴。
- 請保持排氣孔通暢；若有堵塞時，請不要使用此產品。
- 本產品不可持續使用超過20分鐘，以免機體過熱。
- 如有以下情況請勿使用本產品：
  1. 身體腫脹、燒傷、或發炎的部位，或出現皮疹或潰瘍時。
  2. 身體感到麻木及疼痛沒有感覺時。除非有醫生的指導，才可使用。
  3. 腿部有靜脈曲張的狀況，或莫名疼痛時。
  4. 患糖尿病、血液循環不暢順者、足部或腿部發炎或傷口未痊癒者，請不要使用。  
足部受真菌感染、腫脹、骨折或持續疼痛者，請在醫生的指導下使用。
- 如使用按摩器時，身體產生任何痛感或不適，請停止使用，並請醫生診治。

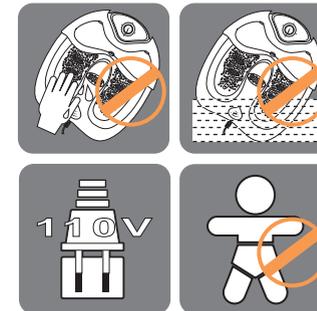

Sampo Good Health

## 各部件安裝

- 將所需附件安裝到按摩配件架。
- 更換左右踏板配件時，用指尖從中間抬起板子，然後將其向按摩器的外壁傾斜取下。將替換板底調到與底部一致後，按進去。

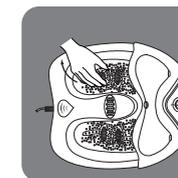

## 使用方法

- 您可以選擇“乾式按摩”或“濕水按摩”功能，但當選用“乾式按摩”功能時，只能將開關轉到設定(1) (按摩/紅外線熱力/保溫)。其餘開關設定，使用時均需為有水狀態。
- 按摩器加水
  1. 加水前，確保按摩器未通電。
  2. 加水(適當的溫度)入按摩器，或利用按摩器獨特的“加熱”功能。
  3. 加入的水不應超過按摩器裡的水刻度指示。
- 接通電源
  1. 將按摩器接上電源。
  2. 放入雙腳或從按摩器裡拿出時都應保持坐的姿勢，因站姿而使壓力過大而使按摩器破裂。
  3. 將開關轉到所需位置。

## 使用方法

功能說明：

- 按摩 / 紅外線熱力 / 保溫
  1. 將腳放入按摩器底部，將操作開關轉到設定 (1)
  2. 透過按摩器振動，可舒緩疲勞疼痛的雙腳。
  3. 將腳放到紅外線上，使熱量集中，舒緩腳底和腳趾的疲勞和疼痛感。

注意：把本產品放在平坦地板上使紅外線的熱量能集中在腳和腳趾的底部。紅外線加熱應令人感到愉快和舒適。  
如果發生任何疼痛或不適，請停止使用並向醫生診治。
- SPA / 保溫 / 加熱
  1. 操作開關應轉到設定 (2)
  2. 因具有獨特的保溫功能，請先加水，然後在按摩器內加熱後，保溫功能使水溫維持在一個舒適的範圍內。
  3. 加熱功能，可以把冷水提升溫度至攝氏40度。如加快升溫時間便要加入溫水，在使用期間，此“加熱功能”會將溫度保持在攝氏40度左右。

## 使用方法

- 按摩 / SPA / 紅外線熱力 / 保溫 / 加熱
  1. 操作開關應轉到設定 (3)
  2. 每天使用十分鐘會使您精力充沛。必要時增加使用次數，但不可持續使用超過20分鐘。請先關掉電源讓其冷卻到室溫才可再使用。
- 使用按摩器附件
  1. 按摩滾輪配件：在此配件上來回移動雙腳，整個腳底可以得到一種舒緩的感覺。
  2. 穴位按摩配件：此配件對腳底有很強的刺激作用。請依個人喜好，調整下壓力道，獲得舒適感。
  3. 按摩球配件：此配件能使疲勞的雙腳獲得舒緩。

## 安全注意事項

### 危險 — 減少觸電危險

1. 使用後要清洗時，請先關閉電源及拔除插頭。
2. 洗澡或淋浴時，請不要使用。
3. 不要將按摩器放在可能會落入浴缸或水槽的地方。
4. 當產品掉入水中時，請先拔掉電源再取出。

### 警告 — 減少燒傷、火災、觸電或傷人的危險

- 電源接通後，不得讓本產品無人看管。不用時，請拔掉電源。
- 不得在毯子或枕頭下使用。
- 所附配件只適合用於此產品，不得使用未經廠家推薦的配件。
- 如果發生電源線或插頭損壞、產品運作不正常、被摔下、被損壞或落入水中時，本產品不得再使用。
- 不要在使用氣霧（噴霧）產品的地方或氧氣處理處使用。
- 不使用時，要先將所有控制鈕旋轉到 O F F 位置。然後，拔出插頭。

## 安全注意事項

- 小心使用紅外線加熱表面。它有可能會導致嚴重的燒傷。皮膚過敏或血液循環不暢順時，不要使用。  
在無人照料時由兒童或老人使用，可能會發生危險。
- 排氣孔被堵塞時，請不要操作本產品。排氣孔處不得有棉絨、毛髮等等。
- 將電源線遠離紅外線加熱表面。
- 加水前請關閉本產品開關並拔除插頭。
- 想睡覺或困倦時，請勿使用。
- 不要在戶外使用此產品。
- 使用時只能採用坐姿。
- 將本產品與正常接地的插座連接。

## 清潔與保養

### 清洗

- 清潔前應先關閉電源並拔除插頭。不可將本產品浸入水中。
- 握住按摩器的邊緣將水倒掉。
- 用水與柔和的清潔液對按摩器進行清洗，然後抹乾，尤其在使用精油後。
- 不要使用腐蝕液或清潔劑清洗按摩器。
- 不用時，將按摩器放置在一個安全、涼爽和乾燥的地方。
- 用一個柔軟的濕布進行擦洗。不要使用清潔劑。不得將按摩器浸入任何液體。  
請遠離一切溶劑和粗糙的清潔劑。不使用時，請將電源線纏在按摩器底部的四隻腳上。



## 緊急處理方法

當本機有動作異常現象發生時，請立即關閉電源，拔掉插頭，儘速通知聲寶0800免費諮詢專線協助處理，切勿自行拆修，以免發生危險。

