

GUIDE D'UTILISATION DU TIRE-LAIT ELITE

NOURRI-SOURCE LAURENTIDES

Le contenu de la boîte de transport Elite

La boîte de transport Elite contient **SEULEMENT** le tire-lait de grade hôpital et les feuillets d'utilisation spécifique au tire-lait. La mère doit donc aussi se procurer un ensemble de bouteille double HygieniKit 25 mm pour utiliser son tire-lait.

L'ensemble bouteille double HygieniKit 25 mm est contenu dans un emballage stérile préassemblé pour patiente unique avec manchons 25mm.

L'ensemble bouteille double Hygienikit 25 mm inclus :

- un raccord double;
- deux tubulures;
- deux capuchons adaptateurs;
- deux diaphragmes;
- deux manchons de sein 25mm;
- quatre valves;
- deux bouteilles de 125 ml avec capuchons.



GUIDE D'UTILISATION DU TIRE-LAIT ELITE LES ACCESSOIRES DISPONIBLES

NOURRI-SOURCE LAURENTIDES

Les accessoires aussi disponibles :

L'organisme possède aussi d'autres produits Ameda. Ces produits sont des pièces de tire-lait ou accessoires pour l'allaitement. Voici le détail:

- Le tire-lait Mya Joy (vente)



- Les manchons CustomFit Medium Large (28,5mm/30,5 mm)



- Le stimulateur d'aréole Flexishield



- L'insert de réduction (22,5 mm)



- La téterelle contact (16, 20, 24 mm)



GUIDE D'UTILISATION DU TIRE-LAIT ELITE LES ACCESSOIRES DISPONIBLES (SUITE)

NOURRI-SOURCE LAURENTIDES

- Les bouteilles d'entreposage (paquet de 4)



- Les valves (2/paquet)-**Doivent être remplacées chaque 6 semaines**



- Les diaphragmes de silicone (2/paquet)



- Le raccord double (2/paquet)



- Le capuchon adaptateur (2/paquet)



- Les tubulures




GUIDE D'UTILISATION DU TIRE-LAIT ELITE LES AVANTAGES DE L'HYGIENIKIT

NOURRI-SOURCE LAURENTIDES

Un avantage de l'HygieniKit :

L'hygieniKit protège le lait maternel contre les virus et les bactéries avec sa barrière protectrice brevetée. Sans barrière efficace, la tubulure peut être un milieu potentiel de condensation, d'humidité et de moisissure et ce risque peut affecter le lait maternel ainsi que les pièces du tire-lait. En revanche, la tubulure Ameda n'entre jamais en contact avec quoi que ce soit d'autre que l'air, ce qui prévient ce danger et simplifie l'utilisation et l'entretien du tire-lait, puisque la tubulure ne nécessite pas de nettoyage. Voici le fonctionnement en image.

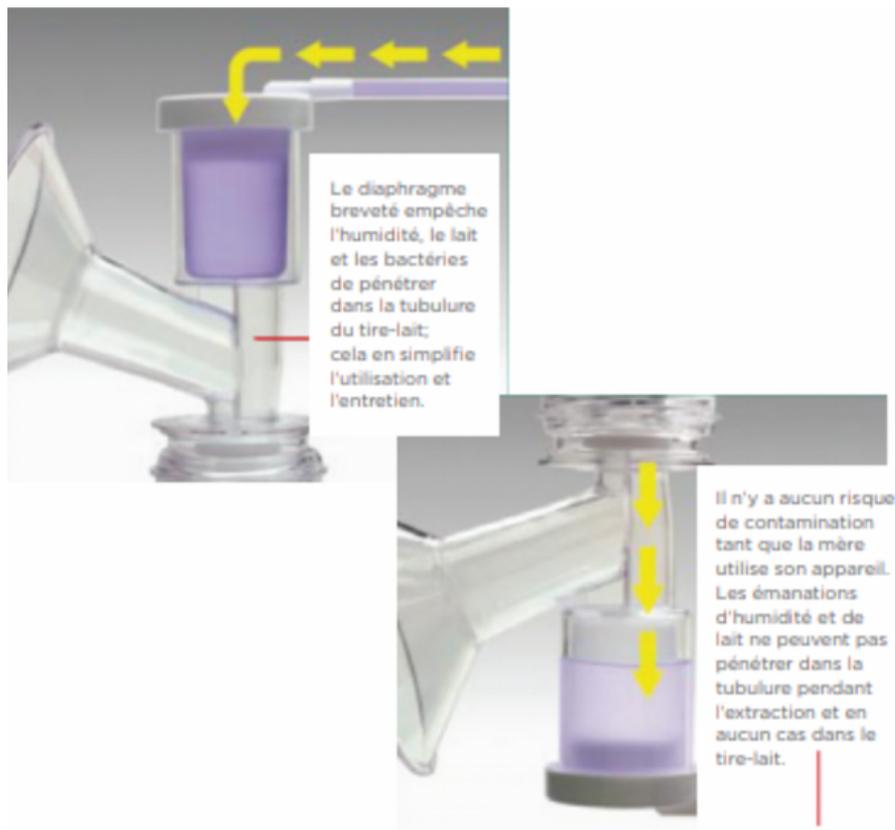

GUIDE D'UTILISATION DU TIRE-LAIT ELITE

TROUVER LA BONNE TAILLE DE MANCHON

NOURRI-SOURCE LAURENTIDES

Comment trouver la bonne taille de manchon :

Il est important de vérifier l'ajustement des deux seins, car certaines femmes ont besoin d'ajustement à un sein, mais pas l'autre. Il est aussi possible que les seins changent de formes et de volume. Il est donc important de vérifier l'ajustement avant l'utilisation.

- **Bon ajustement** : Lors de l'utilisation du tire-lait, le mamelon se déplace librement dans le tunnel du manchon de sein. Nous voyons de l'espace autour du mamelon et peu de l'aréole est aspirée dans le tunnel avec le mamelon.
- **Manchon trop petit** : Pendant l'expression, une partie ou tout le mamelon frotte contre les côtés du tunnel du manchon de sein.
- **Manchon trop grand** : Lors de l'utilisation du tire-lait, une grande partie de l'aréole est aspirée dans le manchon de sein avec le mamelon. L'aréole peut frotter contre le côté du tunnel du manchon




NB: L'hygieniKit 25 mm (ouverture de 25 mm) contient une seule grandeur de manchon qui fonctionne bien pour de nombreuses mères.

Certaines auront besoin d'un manchon plus grand (30,5 mm) ou d'un insert (28,5 mm), si l'expression du lait est inconfortable ou improductive même avec une succion faible.

GUIDE D'UTILISATION DU TIRE-LAIT ELITE TROUVER LA BONNE TAILLE DE MANCHON (EN IMAGES)

NOURRI-SOURCE LAURENTIDES

Voici les différentes combinaisons en images afin de mieux évaluer l'ajustement nécessaire :

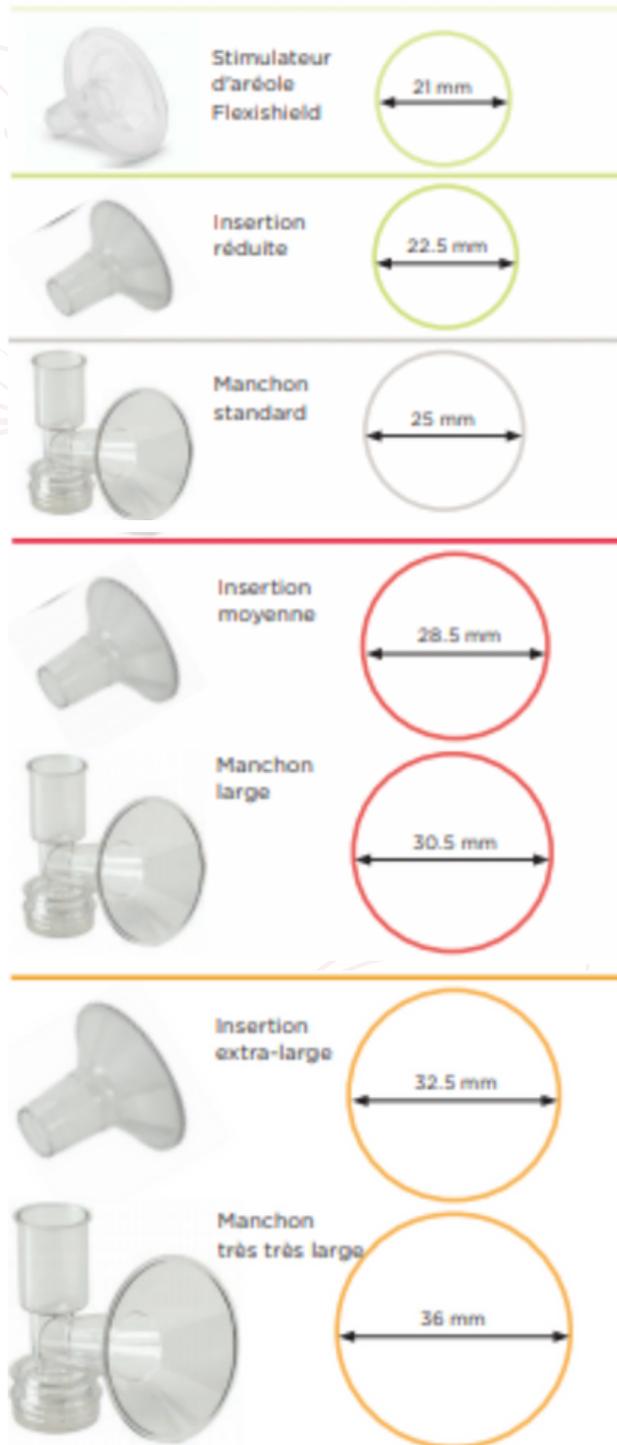


GUIDE D'UTILISATION DU TIRE-LAIT ELITE

GUIDE DE DÉPART RAPIDE ELITE

NOURRI-SOURCE LAURENTIDES

Guide de départ rapide Elite :

Ameda a développé une fiche qui explique bien comment démarrer le tire-lait Elite en 8 étapes simples. La première étape est d'assembler l'ensemble bouteille double HygieniKit 25 mm. Voici une image agrandie de l'assemblage.

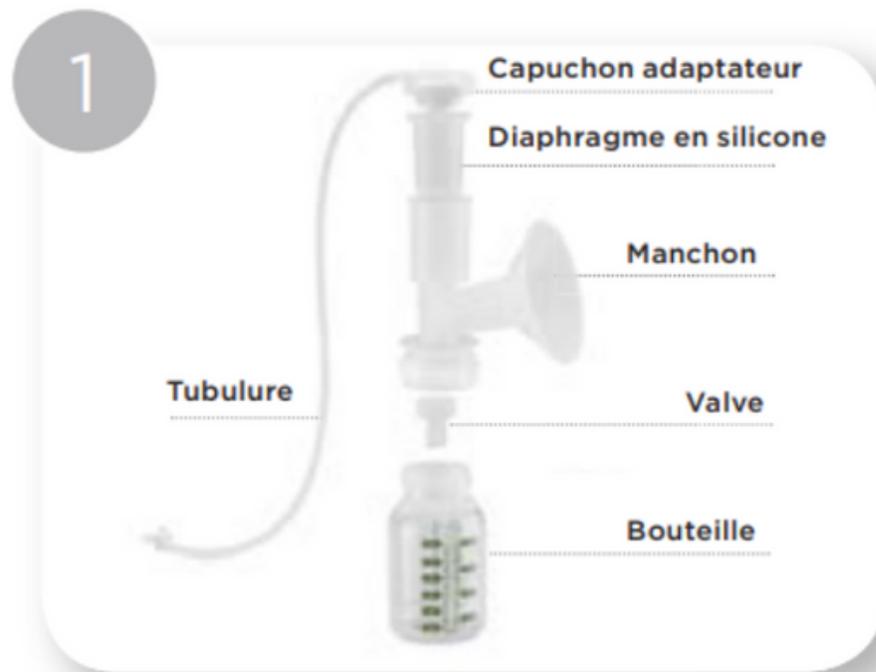

Ensuite, vous pouvez connecter votre ensemble bouteille double HygieniKit 25 mm au tire-lait Elite et en faire le réglage. Il est important de bien suivre les étapes pour éviter des blessures aux mamelons.




GUIDE D'UTILISATION DU TIRE-LAIT ELITE

COMMENT UTILISER LE TIRE-LAIT ELITE


NOURRI-SOURCE LAURENTIDES

Comment utiliser le tire-lait Elite :


Il est possible d'utiliser le tire-lait Elite pour un tirage simple ou double. L'hygieniKit peut être utilisé avec tous les tire-lait Ameda (Elite en location ou Mya Joy à l'achat). Avant l'utilisation du tire-lait, il est important de se laver les mains à l'eau savonneuse.

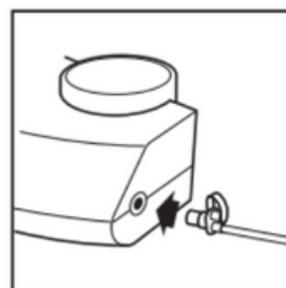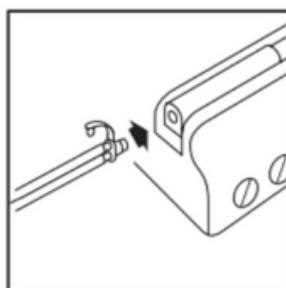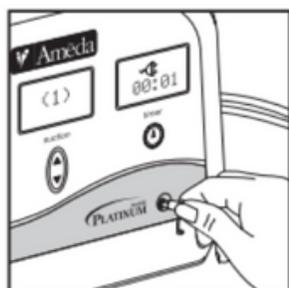

- Voici le branchement pour un **tirage simple**

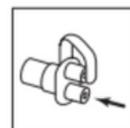

- Voici le branchement pour un **tirage double**

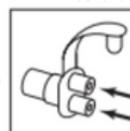

Pour débuter le tirage :


1. Placez l'HygieniKit sur le sein.
2. Centrez les manchons sur chacun des mamelons.
3. Assurez-vous de bien remplir le manchon avec le sein pour créer un joint d'étanchéité.
4. Inclinez un peu le manchon vers le bas pour que le lait s'écoule dans la bouteille.

GUIDE D'UTILISATION DU TIRE-LAIT ELITE

COMMENT UTILISER LE TIRE-LAIT ELITE (EN IMAGES)

NOURRI-SOURCE LAURENTIDES

Comment utiliser le tire-lait Elite (en images) :

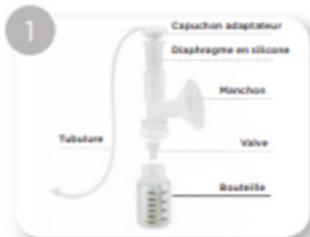

1 Assemblez le système de collecte de lait Ameda.



2 Insérez le connecteur double dans le cylindre à piston du tire-lait.



3 Centrez le(s) manchon(s) sur le(s) mamelon(s) pour bien sceller.



4 Tournez le bouton VACUUM pour mettre en marche et augmentez la succion vers la droite jusqu'au réglage confortable le plus élevé. Commencez vers le milieu et ajustez au besoin.



5 Tournez le bouton de CYCLES vers la droite au maximum.



6 Lorsque le lait commence à couler, retournez le bouton vers la gauche. Commencez vers le milieu et ajustez au besoin.



7 Lorsque le débit de lait commence à ralentir, répétez l'étape 5, puis tourner à gauche pour ralentir quand le débit augmente, répétez au besoin.




8 Tourner le bouton VACUUM jusqu'au bout à gauche pour arrêter le tire-lait.

GUIDE D'UTILISATION DU TIRE-LAIT ELITE COMMENT NETTOYER L'HYGIENIKIT

NOURRI-SOURCE LAURENTIDES

Comment nettoyer l'Hygienikit :

Il est important de se laver les mains avec de l'eau savonneuse avant de manipuler le tire-lait ou les accessoires Ameda. Il est aussi important de ne pas utiliser de solvant ou un agent abrasif. Voici, en images, les différentes étapes pour nettoyer le tire-lait.

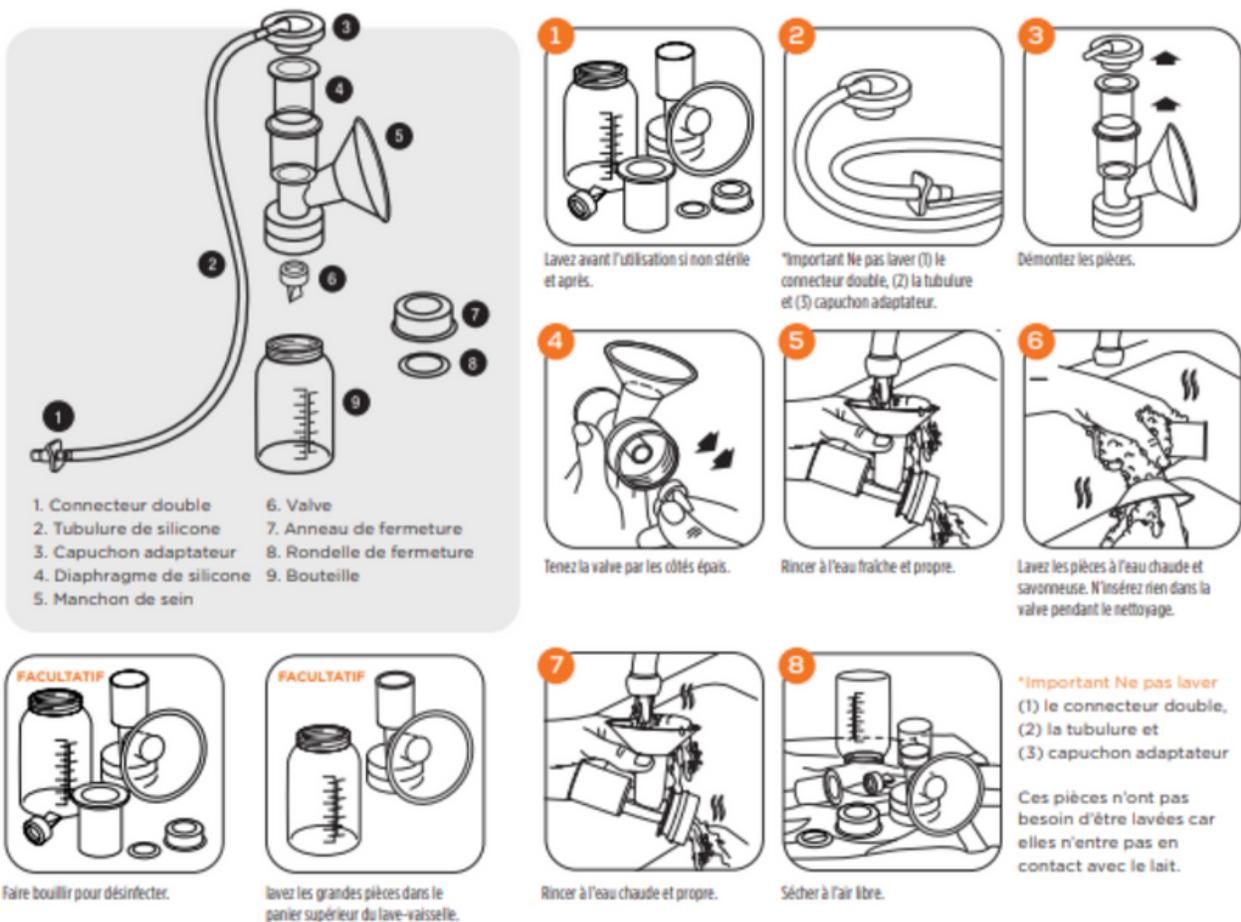

** Cette image est disponible dans la boîte de votre tire-lait.

Il **ne faut donc pas laver** le connecteur double, la tubulure et le capuchon adaptateur. Vous pouvez voir dans l'image bleue les différentes pièces énumérées.

GUIDE D'UTILISATION DU TIRE-LAIT ELITE

CONSERVATION DU LAIT MATERNEL & DÉCONGÉLATION

NOURRI-SOURCE LAURENTIDES

Conservation du lait maternel et décongélation :

	RÉFRIGÉRATEUR 39°F/4°C	RÉFRIGÉRATEUR / CONGÉLATEUR 0°F/-18°C VARIABLE	CONGÉLATEUR 0°F/-18°C
FRAIS	8 jours	3 à 4 mois	12 mois
CONGELÉ PRÉALABLEMENT, DÉCONGELÉ AU FRIGO	24 heures	Ne pas recongeler	Ne pas recongeler
PRÉALABLEMENT CONGELÉ - RÉCHAUFFÉ MAIS NON UTILISÉ	4 heures	Ne pas recongeler	Ne pas recongeler
RÉCHAUFFÉ ET PARTIELLEMENT UTILISÉ	Jeter	Jeter	Jeter

* La durée de conservation peut varier pour les bébés prématurés ou malades. Veuillez vérifier auprès de votre professionnel de la santé

	GLACIÈRE AVEC SACS DE GLACE 59°F/15°C	TEMPÉRATURE AMBIANTE 66°F-72°F 19°C-22°C	TEMPÉRATURE AMBIANTE 72°F-79°F 22°C-26°C
FRAIS	24 heures	6-10 heures	4 heures
PRÉALABLEMENT CONGELÉ - DÉGELÉ AU FRIGO	Ne pas entreposer	4 heures	4 heures
PRÉALABLEMENT CONGELÉ - RÉCHAUFFÉ MAIS NON UTILISÉ	Ne pas entreposer	Jusqu'à la fin de la tétée	Jusqu'à la fin de la tétée
RÉCHAUFFÉ ET PARTIELLEMENT UTILISÉ	Jeter	Jusqu'à la fin de la tétée	Jusqu'à la fin de la tétée

* La durée de conservation peut varier pour les bébés prématurés ou malades. Veuillez vérifier auprès de votre professionnel de la santé

Source: Guide des ressources Ameda