

※ 請務必填妥購買日期並蓋店章以確保擁有權益



- 請勿有獎券規定期外，服務區域限中華民國範圍內。
- 附件件等乙項耗材不在保固範圍內。

※ 請務必填妥購買日期並蓋店章以確保擁有權益

※ 如有下列情形之一者，雖在保證期間內並不予免費維修

- 本產品售後服務係要說明物不附者，則失去保證書保證效力
- 本保證書品項使用於營利商業用時，其保證期限按該場所購期限半保固
- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
- 因使用之過失或誤用而致故障，以該商品故障或損毀
- 單個或數個零件或裝置、鏡頭、光電感測器、顯示器、印表頭、螢光燈管、燈泡、轉子刀片及其
- 按裝位置之變更或搬運而致故障或損毀
- 改摩之起因發生在機體以外者（如：燭影（電）、天線…等）

※ 注意事項

購買日期	年	月	日	經銷商	地址	電話
請務必填妥購買日期並蓋店章，於一週內上網 http://www.samopo.com.tw 啟動保固的權益，應即詳實填寫日期並蓋店章，並於本公司工程師前往服務時主動提出本公司自購日期起一年之保固服務，當本公司回函確認後，即為本公司保固期起始日。若未啟動保固，當有下列情形之一者，雖在保證期間內並不予免費維修						
姓名	地址	出生日期	男 女 年 月 日	電子郵件		
※ 注意事項						

SAMPO

聲寶圓形電子體重計BF-L1104ML

保證書印製於說明書最後頁

並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

SAMPO

聲寶圓形電子體重計


使用說明書

BF-L1104ML

User Manual

安全注意事項

- 強化玻璃承載面堅固耐用，但應避免受硬物敲擊或碰撞，以免產品受損。
- 本產品強化玻璃面應保持乾燥，避免沾水以防止秤重時滑倒。
- 應避免非正常使用或受到撞擊，以免造成玻璃損壞破碎。
- 如果體重計再開機時LCD無顯示，請考慮加大壓秤力量；如果顯示亂碼或長時間無法關機，請取出電池停頓約3秒鐘後再重新裝入。
- 本產品只可作家庭秤量人體體重之用，不可做商業或其他用途。
- 使用時，請置放於堅硬且平坦不易傾倒的地面。

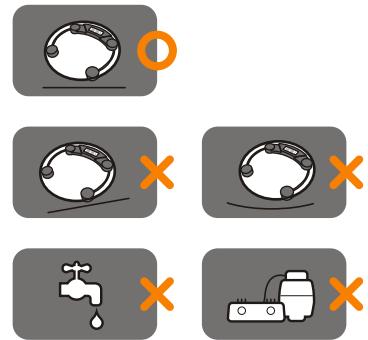


4

目錄

- 2 各部名稱
 - 3 使用方法
 - 4 特別注意要點
 - 5 保養方法
- 緊急處理方法
- 關於售後服務

各部名稱

- ① 液晶顯示螢幕
- ② 強化玻璃表面)
- ③ 腳墊(共4個)
- ④ 電池盒蓋

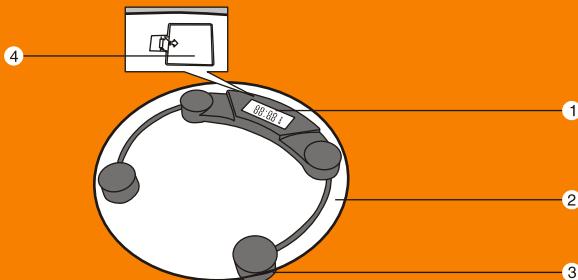


2

使用方法


使用方法

- 開始使用前請先翻轉體重計至反面，打開電池蓋，將絕緣片抽掉後，將電池盒上蓋尾端兩突點對準盒上兩缺口後蓋回電池盒蓋(如圖1、2)
 - 接著將體重計放在平穩且堅硬的地面上，若在地毯...等柔軟的表面上秤重，會影響其準確性。
 - 平穩站上秤面並保持身體平衡，此時螢幕會從開機畫面轉為預設測量單位重量(如"0.0kg")後，螢幕即顯示秤得體重並鎖定重量，如不使用離開秤體，螢幕會消失。(如圖3)
- ※因台灣慣用"kg"測量體重，故本機測量單位僅有"kg"一種測量單位。(如圖4)
- 在秤重範圍內，允許誤差為 $\pm 0.1\text{kg}=100\text{g}$ 。
 - 體重計最大載重量建議為150kg/最低載重為5kg。(注意：嚴重超載或長期壓載，容易造成體重計損害)。
- ※低於5kg測量時，易造成體重計不啓動。

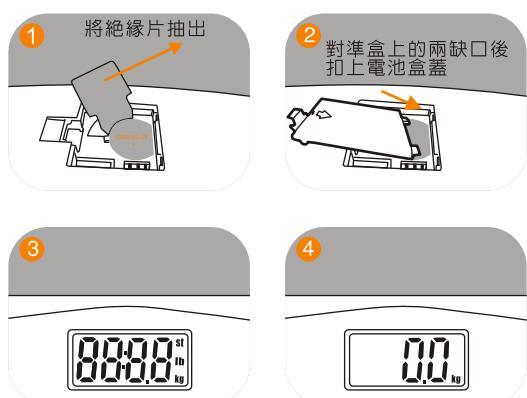

3

額定電壓	淨重	使用電池
DC3V	1.49kg	CR2032 3V鋰電池
外型尺寸	W331XD331X32H (mm)	


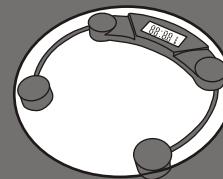


廢電池請回收

保養方法

更換電池

- 用一段時間後，當螢幕出現"LO"時，打開電池蓋，用小支平頭螺絲起子將電池從盒中擣出，並將新電池（本機使用3V CR2032 鋰電池）的 "+" 面朝上裝入，聽到 "卡" 一聲即示電池已裝好，再將電池盒蓋蓋好。（如圖5、6）
- ※若在測量時螢幕出現 "[" 時，代表體重計讀取錯誤，請離開體重計再重新測量。
- ※秤重超過150kg，LCD將顯示" Err "；電力不足時，LCD顯示" LO "，請更換電池。

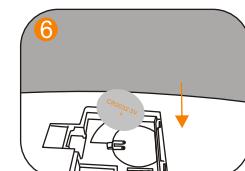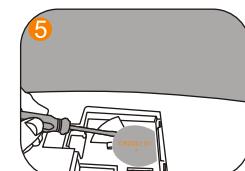

機體清潔

- 不可使用化學溶劑擦拭(必要時可使用沾水的濕布擦拭，但避免水進入秤體內，而且玻璃與金屬連接面不能浸水)。
- 為確保體重計的使用壽命，請勿將體重計長期放置在過度溼熱的環境中。
- 勿將本機體浸泡於水中清洗或以潑水方式清潔，以免發生觸電或短路的危險。

關於售後服務

- 送修前，請先聯絡0800-008-598免費諮詢專線，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理，絕對不要自行拆開外殼進行修理。